

Instructions de sécurité

- Avant toute utilisation, lisez attentivement le mode d'emploi (www.lopital.fr).
- Mise en charge max. : 220kg.
- Mettez toujours le frein pour transférer le client de / vers la chaise.
- Placez les pieds de la personne sur le repose-pied.
- Lors du réglage en hauteur, engagez la barre de fermeture avant et disposez les bras du client sur l'accoudoir.
- La chaise doit toujours être en position basse en déplacement ou en manœuvre.

Panneau de commande

Réglage vers le haut



Réglage vers le bas



Mise en marche



2 secondes

Important !

Il ne faut pas considérer cette fiche d'instructions comme remplacement du mode d'emploi.




Utilisation

1. Allumez l'Elexo XXL en enfonçant pendant 2 secondes le bouton de réglage vers le haut.
Rem. : Après utilisation, l'Elexo XXL se met en veille après 60 minutes.
2. Ajustez la position de la chaise et relevez le repose-pied.
3. Verrouillez le frein de la chaise.
4. Au besoin, rabattez les accoudoirs vers le haut.
5. Assistez la personne à mobilité réduite lorsque celle-ci s'assied.
6. Refermez les accoudoirs et placez les pieds de la personne à mobilité réduite sur les repose-pieds. Lorsque la personne se remet debout, procédez dans l'ordre inverse.

Frein de roue

1. Verrouillage du frein de roue.
2. Déverrouillage.

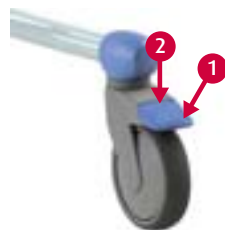

Repose-pied



Les deux repose-pieds doivent être écartés lorsque la personne à mobilité réduite s'assied sur la chaise. Assurez-vous que la personne garde bien les deux pieds sur les repose-pieds lorsque la chaise est en déplacement.

Accoudoir

1. Déverrouillage.
 2. Pivotement arrière.
- Pour refermer, suivez l'ordre inverse.



Rechargement des batteries

Après utilisation, raccordez la chaise Elexo XXL au chargeur afin de maintenir les batteries opérationnelles.



Éteint

Vert

Orange clignotant

Orange

Rouge clignotant

Rouge

État de veille.

Chaise opérationnelle.

L'arrêt d'urgence est activé.

Batterie à mi-charge.

Batterie quasi déchargée.

Batterie déchargée.

Pendant le chargement des batteries, l'Elexo XXL n'est pas utilisable.

Fonction toilettes

- *Compatibilité avec WC* : La chaise Elexo XXL peut être disposée au-dessus de la plupart des cuvettes WC. Ajustez la hauteur du siège.
- *Bassin hygiénique* : la chaise Elexo XXL peut être directement utilisée comme WC en adaptant un bassin hygiénique en plastique / Inox sous le siège.

Abaissement d'urgence

En cas d'arrêt de toutes les fonctions de l'Elexo XXL, utilisez le bouton d'urgence pour faire redescendre le siège.



Nettoyage et entretien

Après chaque utilisation, la chaise Elexo XXL doit être nettoyée à l'eau avec un produit d'entretien ménager courant. N'utilisez pas d'accessoires abrasifs ou de produits solvants agressifs. Vérifiez que les roues sont exemptes de cheveux, de traces de savon ou de poussières régulièrement et nettoyez-les le cas échéant.

Le plan d'entretien complet est repris dans le mode d'emploi (www.lopital.fr).

En cas de panne, adressez-vous à Lopital.

Tél: +31 (0)13 - 5239300, **Fax:** +31 (0)13 - 5239301

E-mail: service@lopital.nl

Mode d'emploi

Retrouvez l'ensemble des modes d'emploi sur : www.lopital.fr